


i-THREAD

Make your beauty perfect


PROCEDURA TRATTAMENTO FULL FACE

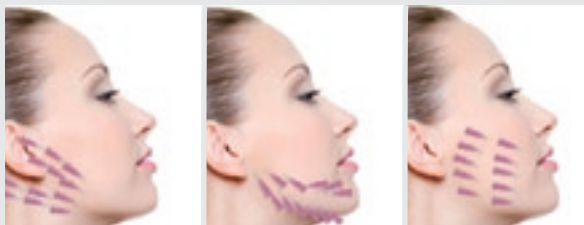

Stage 1

Stage 2


Stage 3

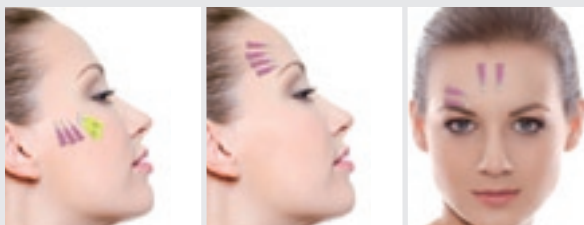

Stage 4

Stage 5

Stage 6

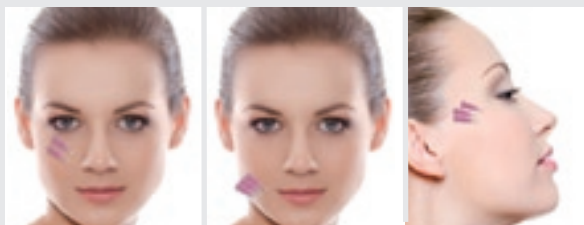

Stage 7

Stage 8

Stage 9

MISURE DISPONIBILI

AGHI G/L	FILO (L)	USP
30G/25mm	30 mm	6-0
30G/38mm	60 mm	6-0
29G/25mm	30 mm	6-0
29G/38mm	60 mm	6-0
29G/50mm	80 mm	6-0
27G/38mm	60 mm	6-0
27G/50mm	80 mm	6-0
27G/60mm	100 mm	6-0
26G/38mm	60 mm	5-0
26G/50mm	80 mm	5-0
26G/60mm	100 mm	6-0
26G/90mm	160 mm	5-0



A2G srl

Via degli Olmetti, 18/C7
00060 Formello (zona ind.)
ROMA
Tel. +39 06 9075457
info@a2glaser.com

www.a2glaser.com

PayPal



i-THREAD

Make your beauty perfect

Biostimolazione meccanica
con microfilo PDO-POLIDIOSSANONE
un rivoluzionario trattamento mini
invasivo per un rapido e naturale
effetto lifting viso e corpo

DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO


distribuito da





PDO
FILI IN POLIDIOSSANONE
MADE IN KOREA

CHE COS'È i-THREAD?

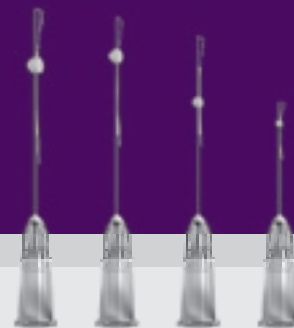

i-THREAD è un innovativo trattamento ambulatoriale che svolge la duplice azione di biostimolazione cutanea e sostegno dei tessuti grazie a un sistema geniale e semplice.

i-THREAD utilizza la proprietà del filo di PDO (Polidioxanone) per ottenere un effetto di stimolazione della proliferazione di collagene e creare un sostegno al tessuto che consenta un effetto liftante.

Duracryl (PDS Suture) è un monofilamento sterile di una sutura assorbibile sintetica, composta da poliestere (p-dioxanone). Il filo PDO è creato per polimerizzazione del para-diossanone monomero.

i-THREAD in PDO dà un sostegno per un lungo periodo, offre eccezionale resistenza alla trazione e flessibilità eccezionale. La sua struttura monofilamento risulta molto maneggevole. I fili sono completamente riassorbiti dal corpo da 6 a 8 mesi per assorbimento biologico tramite idrolisi.

La semplicità e la velocità della procedura unita all'efficacia, alla molteplicità d'utilizzo e il costo relativamente basso hanno reso tale metodica utile per il medico ed apprezzata dai pazienti.

i-THREAD è completamente riassorbibile ed ipoallergenico.

FUNZIONI

Il trattamento con i Fili di Biostimolazione nasce per il rassodamento e la tonificazione dei tessuti molli del viso e del corpo ed è eseguibile in regime ambulatoriale e senza traumatismi. Tali fili svolgono una duplice funzione: nell'immediato forniscono una rete di sostegno nel derma

interessato dalla perdita di consistenza e dal cedimento, successivamente danno una intensa biostimolazione dei tessuti che si prolunga nel tempo.

I fili sono di varie dimensioni e lunghezze da scegliere in base alla grandezza dell'area da trattare. Viene posizionato per metà all'interno di un ago (di calibro diverso secondo lo spessore e la lunghezza del filo, da 25 a 30 Gauge) e l'altra metà viene fermata mediante una pallina di polistirolo inserita nell'ago stesso.

LA PROCEDURA

Una volta identificata la zona da trattare, essa viene designata e poi detersa. I fili vengono posizionati con schemi precisi indicati nel manuale, l'ago viene inserito delicatamente nel tessuto ed una volta penetrato completamente, lo stesso viene sfilato ed il filo resta inserito ed impiantato nei tessuti. Non occorre nessuna anestesia ed è sufficiente applicare una crema antibiotica e raffreddare la parte trattata con ghiaccio secco.

ZONE DI TRATTAMENTO

Le zone che possiamo trattare riguardano il volto: area temporale e contorno occhi, le guance, la zona perilabiale; il collo la parte centrale o laterale.

Gli arti: la zona periombelicale, l'interno braccia, l'interno cosce, il ginocchio nella zona sovrapatellare, ecc. Normalmente si possono mettere da 3 a 10 fili (anche di varie dimensioni) per zona, per lato sul viso (es. guance), fino a 10-20 per lato sul corpo (es. interno braccia). Non ci sono controindicazioni al posizionamento dei fili contemporaneamente su più zone del viso e/o del corpo.

I RISULTATI

Il risultato è immediatamente visibile, naturale e progressivo. Inizialmente si apprezza un significativo effetto di tonificazione dei tessuti. Dopo alcune settimane, l'inten-

sa stimolazione da parte dei fattori di crescita innesca la naturale produzione di collagene ed elastina, permettendo la formazione di una struttura di sostegno con effetto rassodante.

Dopo diversi mesi l'effetto tensore è al suo massimo, poiché vi è stato un graduale incapsulamento del filo nel tessuto connettivo fibroso e la formazione di collagene attorno al filo stesso.

DURATA DELL'EFFETTO

Dopo circa 6-8 mesi i fili si riassorbono grazie ad un'azione idrolitica, in maniera del tutto naturale ed innocua, ma la biostimolazione e l'effetto tonificante durano ancora, poiché il supporto meccanico prodotto dai fili genera una importante stimolazione endogena i cui benefici saranno visibili molto più a lungo.

Dopo il primo trattamento si può effettuare un altro impianto, prolungando l'effetto per molto tempo.

ASSOCIAZIONE CON ALTRI TRATTAMENTI

Già dopo 2-3 settimane dal trattamento si possono effettuare altri trattamenti nella stessa zona quali: filler, botulino, peeling superficiali, biostimolazione o rivitalizzazione, fili di sospensione.

Per i trattamenti laser, luce pulsata, radiofrequenza, peeling medio-profondi, è consigliato attendere 2-3 mesi.

COMPLICAZIONI O CONTROINDICAZIONI

La procedura è molto sicura, veloce e quasi indolore. Può apparire un lieve rossore nell'immediato post-trattamento.

Le controindicazioni sono quelle di tutte le procedure infiltrative, quali: infezioni batteriche, virali e micotiche dell'area da trattare, infezioni sistemiche, allergie conosciute ai materiali utilizzati, trattamento con farmaci antitumorali e/o immunosoppressori.